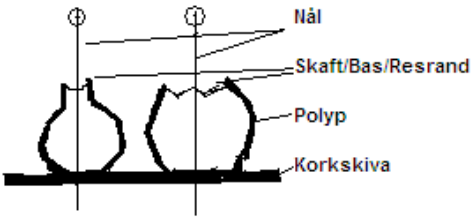
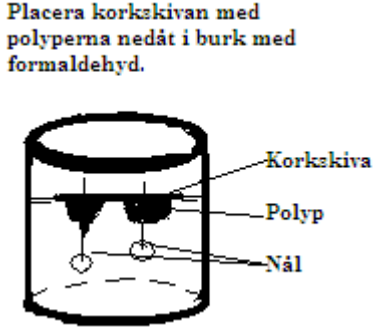


## Provtagningsanvisningar Patologi

### Gastrointestinala prover

<b>Remiss</b>	Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ” <a href="#">PAD-remiss Allmän</a>
<b>Allmänt</b>	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. <b>Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</b>
<b>Fixering</b>	<b>Biopsier:</b> 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Fixeringslösningen kan vara färgsatt med erytrosin för att underlätta hanteringen vid laboratoriet.  <b>Polyper:</b> 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning  <b>Tarmresektat:</b> rikligt med 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning i minst tre dygn. Lösningen byts till ny formaldehyd efter ett dygn. Formaldehyden hålls av före transport till laboratoriet.
<b>Utförande</b>	<b>Biopsier från esofagus, ventrikel, tunntarm, kolon och rektum:</b> Lägg proverna så fort som möjligt i fixeringslösning.  <b>Polyper:</b> Polyper utan skaft och större än 1 cm monteras på korkskiva med en nål genom polypfästet centralt, för att möjliggöra bedömning av radikalitet. Fixera så fort som möjligt.   <b>Tarmresektat:</b> Montera tarmen på korkskiva  <b>Suturmarkera</b> – resektionsränder – kärlligatur – eventuell ytterligare markering av område/förändring där särskilt noggrann analys önskas (ex. perforation, fistel, små tumörförändringar).

## Provtagningsanvisningar Patologi

<b>Övrigt</b>	För anvisningar gällande prover med frågeställning motilitetsstörning/Hirschprung, ta kontakt med laboratoriets tarm-team, se nedan.
<b>Kontakt</b>	För frågor rörande hantering av gastrointestinala prover: Tarm-teamet på Klinisk patologi och cytologi SU/Sahlgrenska tel: 031-342 15 16  För vidare information om erytrosinfärgad formaldehyd kontakta: Enhetschef Marita Andersson, Klinisk patologi och cytologi SU/Sahlgrenska. tel 031-342 20 16
<b>Transport</b>	Proven kan sändas per post, skickas med interntransport eller lämnas direkt på laboratoriet.  Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prover i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.  <b>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</b>