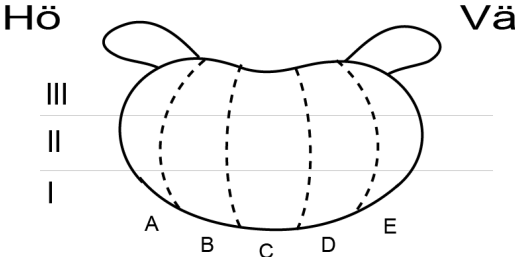


Provtagningsanvisningar Patologi

Nålbiopsier från prostata

Remiss	<p>PAD remiss kan skrivas ut direkt från vår hemsida. Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen”</p> <p>Använd den.särskilda remissen för mellannålbiopsier från prostata (följ länken nedan) och beteckna biopsierna med de koordinater vilka motsvarar biopsiställena PAD remiss</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>PAD-Prostata Mellannålsbiopsier Extra information Mellannålsbiopsier Prostata</p>
Allmänt	<p>Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskär/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn.</p> <p>Observera att provtagningskär inte får märkas på lock.</p>
Fixering	<p>4% fosfatbuffrad formaldehydlösning färgsatt med erytrosin. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.</p>
Utförande	<p>Biopsin placeras på papper, lämpligt sådant är förpackningsmaterialet till provnålen. Pappret, med biopsin läggs i fixeringslösning så fort som möjligt. Detta är av stor vikt för att undvika artefakter vilka försvårar den mikroskopiska bedömningen.</p> <p>Markerar biopsipositionerna på preparatburkarna för hand bör spritpenna undvikas då texten lätt löses upp och försvinner vid hanteringen på laboratoriet. Använd istället kulspetspenna.</p>
Övrigt	<p>För vidare instruktioner om färgad formalin, kontakta: Enhetschef Marita Andersson Patologen SU/Sahlgrenska: tel. 031-342 20 16</p>
Kontakt	<p>Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16</p>
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet.</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</p>