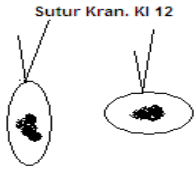


Provtagningsanvisningar Patologi

Hud

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” PAD-remiss Allmän
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Allmänt gäller att provet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.
Utförande	Hudbiopsier bör alltid omfatta tillräcklig mängd subcutis. Sutmärk provet när det är viktigt med radikalitetsbedömning, tex. vid frågeställning malignitet/precancerösa tillstånd. Provet märks med sutur i spets eller långsida. 
Övrigt	Ange alltid var på kroppen provet är taget. Ange vilken typ av prov, tex. stansbiopsi , shavebiopsi, skrap, excision
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med intertransport eller lämnas direkt på laboratoriet. Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle. Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.